

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963


Ferritin (FERR) — 15 Tage – 1 Jahre (µg/l)

Gruppe: 15 Tage – 1 Jahre

Erstellt am 6.5.2026, 22:30:00 · n = 109 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Ferritin (FERR) — 15 Tage – 1 Jahre (µg/l)

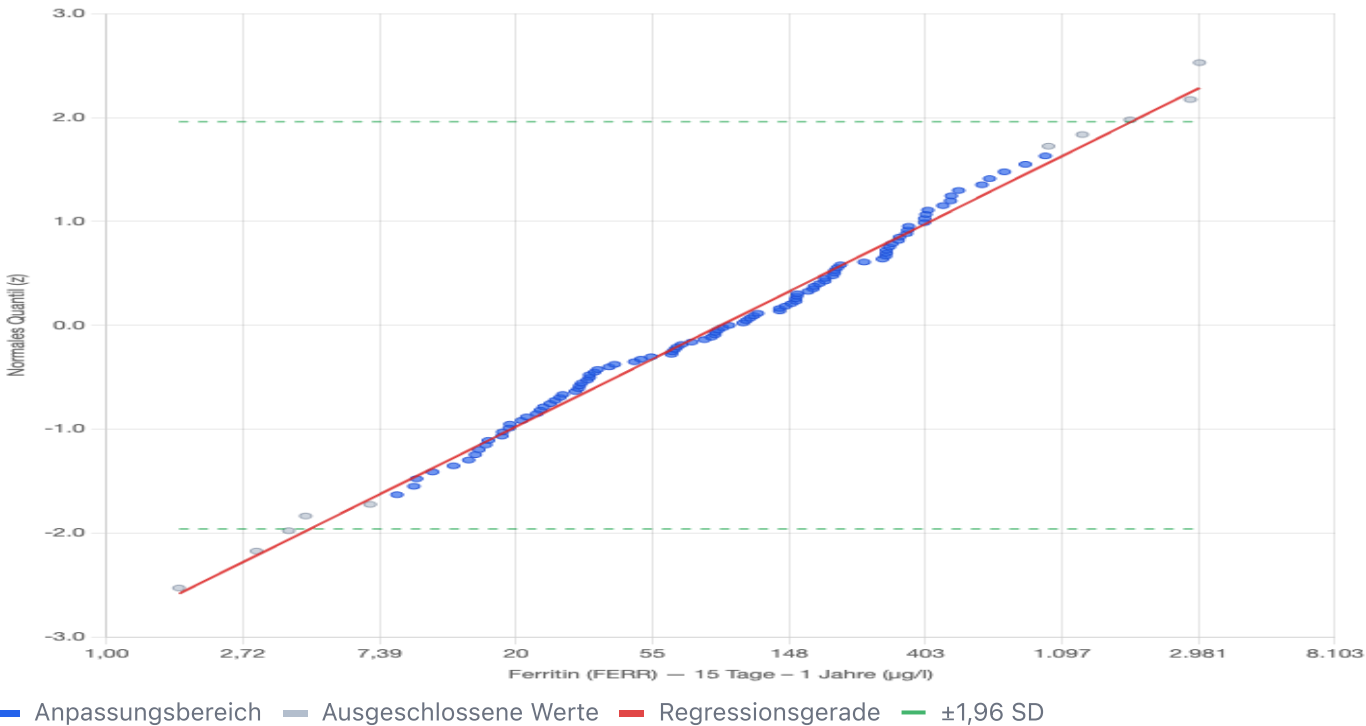

Ergebnisse: Ferritin (FERR) — 15 Tage – 1 Jahre (µg/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	109
Minimum	1,70 µg/l
Maximum	2.998,00 µg/l
Median	95,50 µg/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (µ)	89,97 µg/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	4,641 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	34,12 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R²)	99.0%
Verwendeter Bereich	99 von 109 Werten (4.6 % – 95.4 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

4,44 – 1.822,71

µg/l

Regression: $z = 0,65146 \cdot x - 2,93121$


$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

R² < 0,99: Linearität akzeptabel. Grenzl意思 ggf. nachkorrigieren.

n = 109 < 120: Wenige Daten – Referenzintervall mit Vorsicht interpretieren (CLSI EP28-A3c).


Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R²) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung

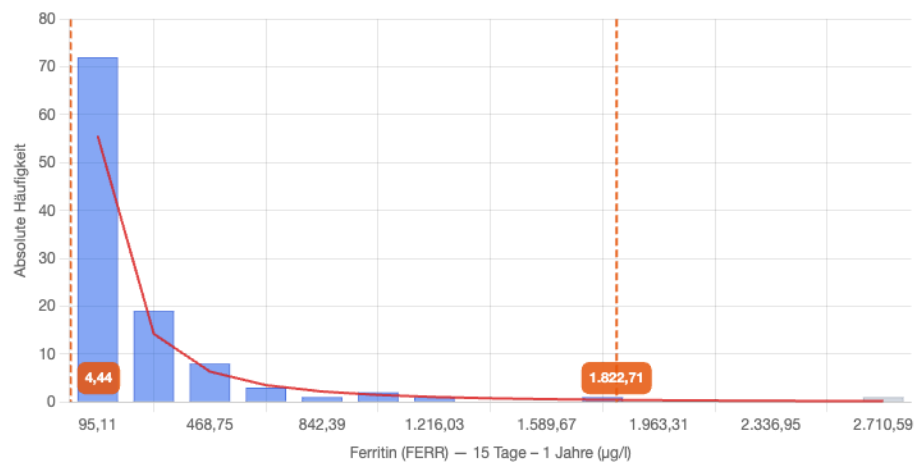

Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Ferritin (FERR) — 15 Tage — 1 Jahre (µg/l)

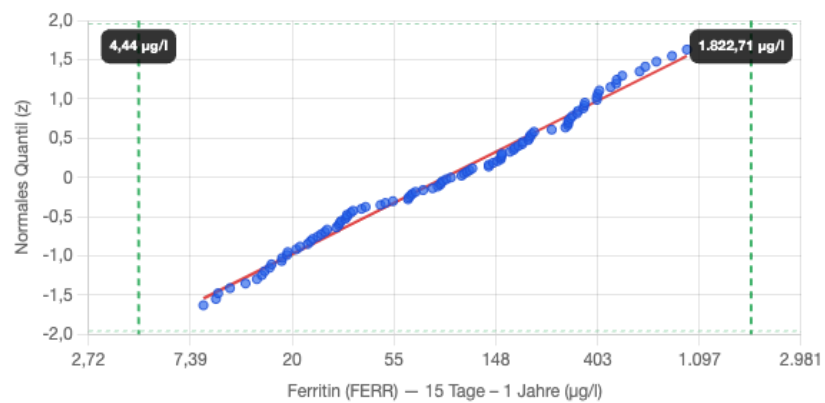

Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.