

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963


Ferritin (FERR) — weiblich, 15 Jahre – 18 Jahre (µg/l)

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Gruppe: weiblich, 15 Jahre – 18 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 11:22:15 · n = 534 Messwerte

Hoffmann-Plot: Ferritin (FERR) — weiblich, 15 Jahre – 18 Jahre (µg/l)

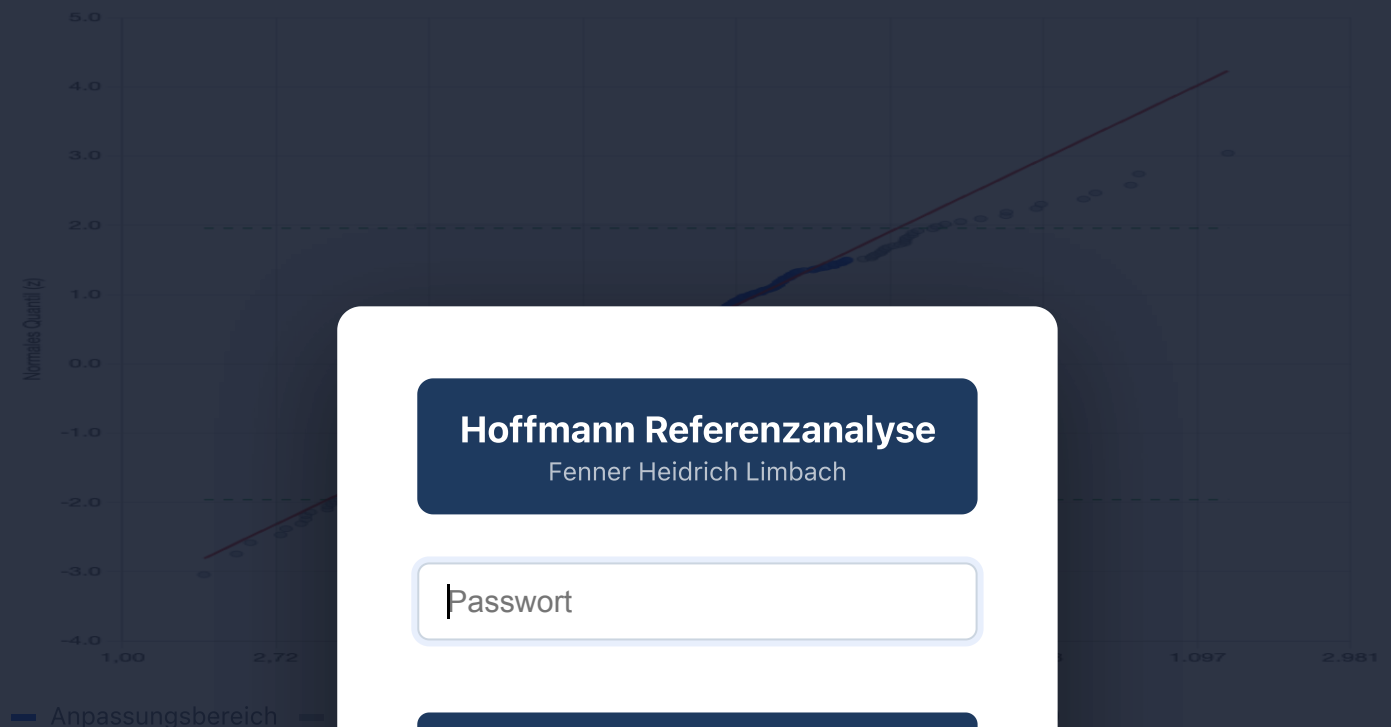

Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Anmelden

Ergebnisse: Ferritin (FERR)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)

Anzahl Messwerte (n)	534
Minimum	1,70 µg/l
Maximum	1.336,00 µg/l
Median	24,45 µg/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (µ)	24,32 µg/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	2,577 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	29,66 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R²)	99.9%
Verwendeter Bereich	473 von 534 Werten (4.9 % – 93.4 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

3,80 – 155,56


µg/l

Regression: $z = 1,05629 \cdot x - 3,37110$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$


Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R²) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung

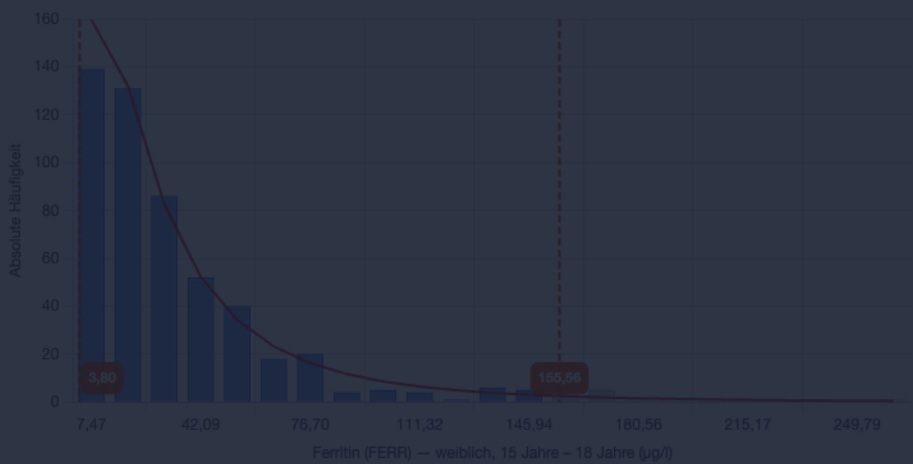

Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Ferritin (FERR) — weiblich, 15 Jahre – 18 Jahre (µg/l)

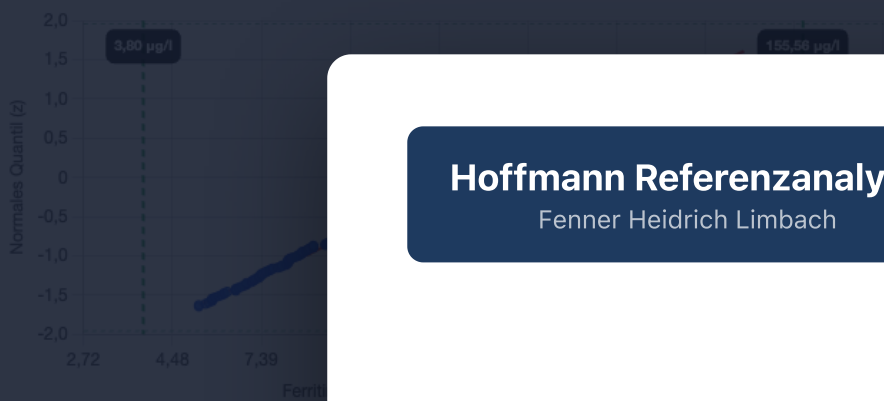

Hoffmann Referenzanalyse
Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression verwendete Wert ist $\pm 1,96$ SD.